

[illegible]

MAC 600



Systembeschreibung

- 12-Kanal Display auf 4.3" Farb-LCD
- Externer Speicher auf SD-Karte
- On-screen 12 SL Vermessung & Interpretation
- Nummern-Tastenfeld IDs (1st & 2nd) Eingabe. Drop-down Buchstaben/Zeichen (English)
- PDF, XML Export auf SD-Karte
- Konfigurierbarer PDF -Name
- Externes Netzteil

Standard Software

- 12-SL Vermessung

Optionale Software

- 12-SL Interpretation (nach IEC 60601-2-51)
- PDF und XML - Export
- Kommunikation an CardioSoft® und MUSE®

Registrierung

- Z-Faltpapier
- Rollenpapier

Betriebsarten

- Automatik
- Manuell

Systemkomponenten

Sofort einsatzbereit durch Standard-Komplettausstattung

Lieferumfang:

- Grundgerät incl. Vermessung und Akku
- Patientenkabel
- Faltpapier
- Elektrodencreme
- Klammer und Saugballelektroden
- Netzkabel
- Gerätetasche (opt.)
- KISS-Elektrodensauganlage(opt.)



Herausragende Leistungen

- 12-Kanal EKG Gerät mit EKG Analyse, (opt)
- 12-Kanal Display auf 4.3" Farb-LCD
- 3-Kanal Ausdruck plus 1 Rhythmus-Kanal
- Hookup-Advisor® für optimale EKG-Signale
- Simultane Vermessung von 12 Ableitungen
- Vermessungs- und Interpretationsangabe auf dem Display (Anzeige ohne Ausdruck möglich)
- Selbsterklärende und einfache Bedienung
- Speicherung von EKG, konfigurierbaren PDF und XML mit Transfer zu CardioSoft® oder MUSE® (opt)
- Leicht, transportabel mit nur 1,1 kg
- Akkubetrieb für 250 EKG



GE imagination at work

Leistungen

1. EKG Ausdruck:



Optionen

2. PDF

3. XML

4. Interpretation, voll



GE imagination at work



„Turnschuh-Netzwerk“



Seriellles Kabel



Connectivity Server mit Serial-IP und „vom/zum EKG-Schreiber“

MAC800/1600/3500/5000/5500-EKG's von Datenträger empfangen


Datenträgerverzeichnis

C:\Users\Georg Holtmann\Documents\Puffer\EKG\

Ändern...

XML-Format

(SW-Option)

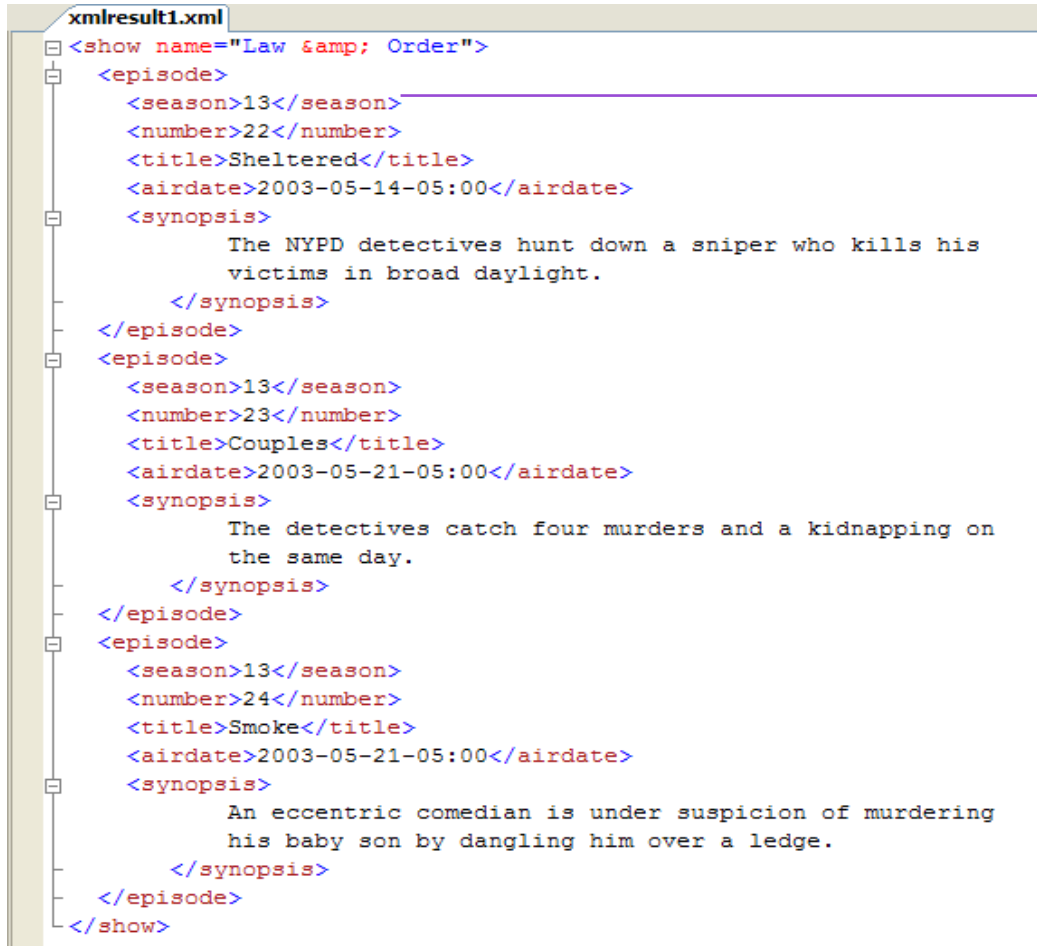

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<show name="Law & Order">
  <episode>
    <season>13</season>
    <number>22</number>
    <title>Sheltered</title>
    <airdate>2003-05-14-05:00</airdate>
    <synopsis>
      The NYPD detectives hunt down a sniper who kills his
      victims in broad daylight.
    </synopsis>
  </episode>
  <episode>
    <season>13</season>
    <number>23</number>
    <title>Couples</title>
    <airdate>2003-05-21-05:00</airdate>
    <synopsis>
      The detectives catch four murders and a kidnapping on
      the same day.
    </synopsis>
  </episode>
  <episode>
    <season>13</season>
    <number>24</number>
    <title>Smoke</title>
    <airdate>2003-05-21-05:00</airdate>
    <synopsis>
      An eccentric comedian is under suspicion of murdering
      his baby son by dangling him over a ledge.
    </synopsis>
  </episode>
</show>
```

`<season>13</season>`

Der MAC 600 generiert selbst die XML-Datei und legt diese auf die SD-Karte.

Eine XML-Datei ist ein echter ROHDATEN Export mit ALLEN Informationen die das EKG betreffen.

Mit einem XML-Viewer kann man beispielsweise das EKG betrachten und eventuell bearbeiten.




GE imagination at work

PDF-Report

(SW-Option)

Der **MAC 600** generiert selbst die PDF-Datei und legt diese auf die SD-Karte.

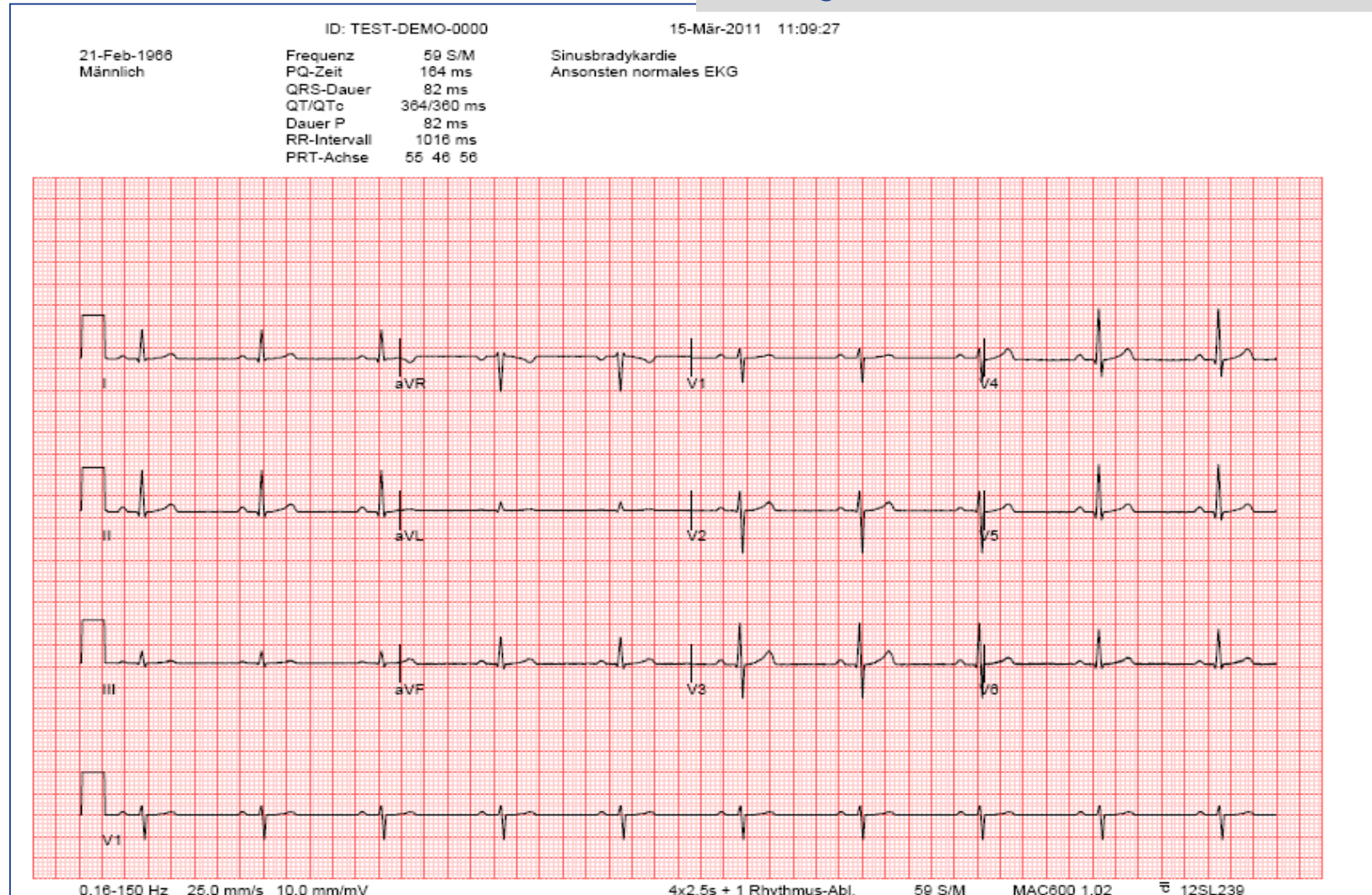

GE imagination at work

PDF-Konfiguration

- Patienten ID
- Sekundär ID
- Geburtsdatum
- Datum und Zeit

PDF-Konfiguration

Im PDF-Format speichern Ja

PDF-Tabelle Ja

PDF-Format 4 x 2,5s + 1 Rhythmus

PDF-Dateinamen-Konfiguration

ID Ja

Sekundär ID Nein

Geburtsdatum Nein

Datum und Zeit Nein

Zurück



MAC 600 - Connectivity -



- PDF =>  *Konfigurierbar (mit Einschränkungen)*
Pat.-ID _ Geb. _ Datum _ Zeit [hh-mm-ss] .PDF
TEST-DEMO-0000_1966-2-21_2011-3-15_11-9-27 .PDF
- XML => 
- EKG =>  (Hiltop) zu CardioSoft & MUSE
- EKG =>  (Seriell) zu CardioSoft & MUSE

Die EKG-Untersuchung von der SD-Karte, kann automatisch mit dem CardioSoft „Connectivity Server“ eingelesen werden.
(s. Seiten „[Zusammenfassung](#)“ & „[Connectivity Server](#)“)